

paro[®] sonic

user manuel



CZ



SWISS
MADE

CZ- **paro**[®] sonic

Srdečně Vám gratulujeme ke koupi výrobku **paro**[®] sonic – sonického zubního kartáčku nejnovější generace.

Hydrodynamický sonický zubní kartáček se systémem TOTAL SONIC CARE – dvě rozdílné hlavice pro čištění zubů a jedinečná interdentální funkce – pro celkovou dokonalou zubní péči.

Velmi praktický a snadno ovladatelný díky lehké rukojeti, stejně jako silnému sonickému pohonu a dobíjecí Li-Ion baterii. Časovač udává délku procedury čištění a praktický cestovní zámek chrání před náhodným zapnutím kartáčku. Technologie **paro**[®] HYDRODYNAMIC SENSITIV zajistí skvělé a jemné čištění.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití. Návod k použití obsahuje tipy a triky pro správné a důkladné čištění zubů. Další informace a výukové video naleznete na www.paro.com pod produktem **paro**[®] sonic.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

- Pokud jste nedávno podstoupili operaci nebo ošetření v dutině ústní, poraďte se se svým zubním lékařem.
- Pokud po použití zubního kartáčku dojde k dlouhodobému nebo silnému krvácení, poraďte se se svým zubním lékařem.
- Děti nebo osoby s mentálním postižením by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno správné používání výrobku.
- Nedovolte, aby si děti s výrobkem hrály.

UPOZORNĚNÍ

- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozený, nabíječku zlikvidujte.
- Udržujte nabíječku mimo dosah vody! Neodkládejte nabíječku nad ani v blízkosti vany nebo umyvadla naplněného vodou.
- Nabíječku připojenou k síti chraňte před horkými povrchy.
- Sonický zubní kartáček **paro**[®] sonic splňuje bezpečnostní normu pro elektromagnetická zařízení. Pokud však jako uživatel implantátu nebo kardiostimulátoru máte dotazy ohledně používání tohoto výrobku, kontaktujte prosím svého lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru nebo implantátu.


CO JE DOBRÉ VĚDĚT

VOLBA MÓDU - PRO HLAVICE ZUBNÍHO KARTÁČKU

Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (1) během 2 sekund přepnete kartáček z módu SENSITIVE do módu INTENSIVE. Po 2 sekundách je mód nastaven a opětovným stisknutím se kartáček **paro**[®] sonic vypne. Po opětovném zapnutí se kartáček **paro**[®] sonic spustí v módu, ve kterém jste si zuby čistili naposledy -> Paměťový efekt

Držte hlavu kartáčku pod úhlem 45° k zubům a opatrně mírným tlakem vedte zubní kartáček po jednotlivých zubech. U každého zubu setrvejte cca 2–3 sekundy. Dalším třecím pohybem od dásně k okraji zubu (od červené k bílé) podpoříte čistící účinek.

V každém ze čtyř čelistních kvadrantů vedte zubní kartáček podél žvýkací plochy, poté podél vnější plochy a nakonec podél vnitřní strany řady zubů (obrázek 2).

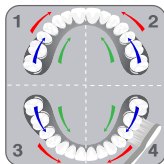

Časovač kvadrantů vám pomůže sledovat čas a krátkým přerušením chodu kartáčku signalizuje, že máte přejít k dalším kvadrantům. Po vyčištění čtyř kvadrantů se kartáček **paro**[®] sonic automaticky vypne. Hlavice zubního kartáčku je třeba měnit každé 2 měsíce.

① Tlačítko Start/Stop a volba módu při použití dané hlavice na čištění zubů

ⓘ SENSITIVE - 40'000 impulzů za minutu / časovač 2 minuty

ⓘ INTENSIVE - 35'000 impulzů za minutu / časovač 3 minuty

VOLBA MÓDU – PRO INTERDENTÁLNÍ HLAVICE

S kartáčkem **paro**[®] *sonic* a mezizubními kartáčky **paro**[®] *isola F* si v módu INTERDENTAL pohodlně vyčistíte mezizubní prostory, ortodontický aparát a implantáty. Mezizubní kartáček **paro**[®] *isola F* o odpovídající velikosti našroubujete do hlavice Interdental, spustíte kartáček **paro**[®] *sonic* v módu INTERDENTAL a zasunete kartáček do mezizubního prostoru, pohybujte kartáčkem dvakrát tam a zpět a poté přejděte do dalšího mezizubního prostoru.

DŮLEŽITÉ: Mezizubní kartáčky **paro**[®] *isola F* používejte pouze v módu INTERDENTAL.

② Tlačítko Start/Stop při použití interdentalní hlavice nebo cestovní zámek

① INTERDENTALE - ljemné vibrace pro čištění mezizubních prostor, implantátů i ortodontického aparátu s mezizubními kartáčky **paro**[®] *isola F*

CESTOVNÍ ZÁMEK

Stisknutím tlačítka Start/Stop INTERDENTAL po dobu 4 sekund se aktivuje cestovní zámek. Funkční tlačítka jsou tak uzamčena a náhodné spuštění není možné.

Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop INTERDENTAL po dobu 4 sekund se cestovní zámek odblokuje. Umístěním kartáčku **paro**[®] *sonic* do zapojené nabíječky se cestovní zámek automaticky deaktivuje.

③ INDIKACE NABÍTÍ BATERIE

Před použitím kartáčku **paro**[®] *sonic* kartáček plně nabijte po dobu 10 hodin. Symbol baterie indikuje nabíjení baterie po čištění zubů:

Symbol svítí trvale: 100–75 %

Intenzita světla symbolu se pomalu snižuje: 75–35 %

Rychle blikající symbol: méně než 35 %

Pokud symbol rychle bliká, pak by se měl kartáček **paro**[®] *sonic* nabít.

HLAVICE ZUBNÍHO KARTÁČKU A ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍCH PROSTOR

④ Le **paro**[®] *sonic* soft-clean - jemně a šetrně čistí, chrání citlivé dásně a odhalené krčky

⑤ Le **paro**[®] *sonic* duo-clean - intenzivnější čištění s hlubokým účinkem

⑥ Le **paro**[®] *sonic* interdental - díky individuálně vyměnitelným mezizubním kartáčkům **paro**[®] *isola F* je ideální k čištění klenutých míst, mezizubních prostorů, implantátů i ortodontického aparátu

⑦ USB – nabíječka se stojánkem pro kartáček a adaptér

TECHNICKÉ ÚDAJE

Siťové napětí: 100–240 V AC, 50 Hz, 3.7V, třída II, IPX7

Baterie: Nabíjecí lithium-iontová baterie

Doba provozu (plná až prázdná baterie): ~ 120 minut

Doba nabíjení při prvním nabíjení: 10 hodin

Tento přístroj splňuje požadavky směrnice EU (EMC/RoHS) a směrnice o zařízeních nízkého napětí.

LIKVIDACE

Tento přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii. Po skončení životnosti musí být výrobek předán k recyklaci nebo ekologicky zlikvidován.

V obchodech nebo na veřejných sběrných místech jsou k dispozici kontejnery určené k likvidaci a recyklaci.

ZÁRUKA

Společnost **paro**[®] poskytuje dvouletou záruku od data zakoupení. Tato záruka platí pro všechny země, ve kterých je tento výrobek distribuován společností **paro**[®] nebo autorizovaným prodejcem.

Záruka se nevztahuje na následující: Škody vzniklé nesprávným používáním, normálním opotřebením, normálním používáním, a to zejména hlavice kartáčku, a vady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu nebo provoz přístroje. Záruka zaniká, pokud jsou opravy prováděny neoprávněnými osobami nebo pokud je otevřen kryt přístroje. Chcete-li uplatnit nárok na záruku, zašlete kompletní přístroj spolu s dokladem o koupi oficiálnímu zástupci společnosti **paro**[®] ve vaší zemi. Pokud není znám, kontaktujte nás prosím přímo na:

www.paro.com, +41 (0)44 723 11 10 (cena hovoru odpovídá obvyklým nákladům za hovor do zahraničí).
paro - Esro AG - 8802 Kilchberg | info@paro.com | www.paro.com

paro® sonic refill



paro® sonic soft-clean #761



paro® sonic duo-clean #762



paro® sonic interdental #763



paro® isola F

#1048



#1041



#1049



#1043



#1042



#1046



#1044



#1047



#1013



Toothpaste recommendation

paro® amin #2668

paro® sonic friendly & tested

Optimal carries protection

✓ 1250 ppm Amin fluoride

Gum strengthening

✓ SLS free

✓ Panthenol

Mint flavour



paro® – developed and produced by

Esro AG | CH-8802 Kilchberg | Switzerland

www.paro.com | info@paro.com